

MAQUET
GETINGE GROUP

M-CARRIER
RAPIDAMENTE A SEU DISPOR

SURGICAL WORKPLACE





M-CARRIER
ERGONOMIA NA PONTA DE SEUS DEDOS
MAQUET – O PADRÃO GOLD



A MAQUET, líder em sistemas e produtos médicos há mais de 170 anos, define o padrão para centros cirúrgicos sofisticados na Sala de Cirurgia, Unidade de Terapia Intensiva e Transporte de Paciente. Os produtos integrados da MAQUET são especificamente projetados para proporcionar tratamento clínico ideal e conceitos de terapia para hospitais de terapia aguda. Dentro de Centros Cirúrgicos, uma das três divisões do MAQUET Group, a nova, leve unidade de fornecimento motorizada de teto (CSU) M-CARRIER é um componente essencial para criar centros cirúrgicos realmente ergonômicos.

Com velocidade, dimensões pequenas e múltiplas combinações de capacidade, o M-CARRIER está imediatamente a seu dispor em UTI, Centro Cirúrgico, pronto-socorro e UTIN. Ao apertar de um botão, o M-CARRIER leva o suporte ao fluxo de trabalho a um novo nível. A modularidade desse CSU permite uma integração contínua de modalidades e tecnologias futuras.

MAQUET – O Padrão Gold

TERAPIA CRÍTICA MELHOR AMBIENTE DE TRABALHO – TERAPIA APRIMORADA


Os módulos e acessórios de escolha de distribuição de M-CARRIER o tornam versátil para cumprir as exigências de uso em uma ampla gama de aplicações.

Entre dispor um lado seco de uma UTI ou acomodar toda uma configuração de UTIN, graças à capacidade de carga de 80-100kg (176-221lbs) do M-CARRIER facilmente ergue e suspende toda uma estação de trabalho.

- Monitoramento de paciente, CIS e o painel de controle do ventilador – tudo em uma altura de trabalho ergonômica.
- Capacidade de inúmeras portas de dados, soquetes elétricos, saídas de gás e mesmo 2 vácuo/sucção, bem como iluminação ambiente.

- Pés suspensos: Para coleta de dados e fornecimentos de equipamentos adicionais.
- Amplo raio de ação: Faixa de movimento sem igual para fácil manobra da estação de trabalho – no lado do paciente e do cuidador ou fora do caminho em caso de emergências.
- A possibilidade de mudar os lados seco e molhado suporta todas as escolhas de terapia.
- O projeto regular é discreto e higiênico, para um ambiente de terapia sutil e seguro.



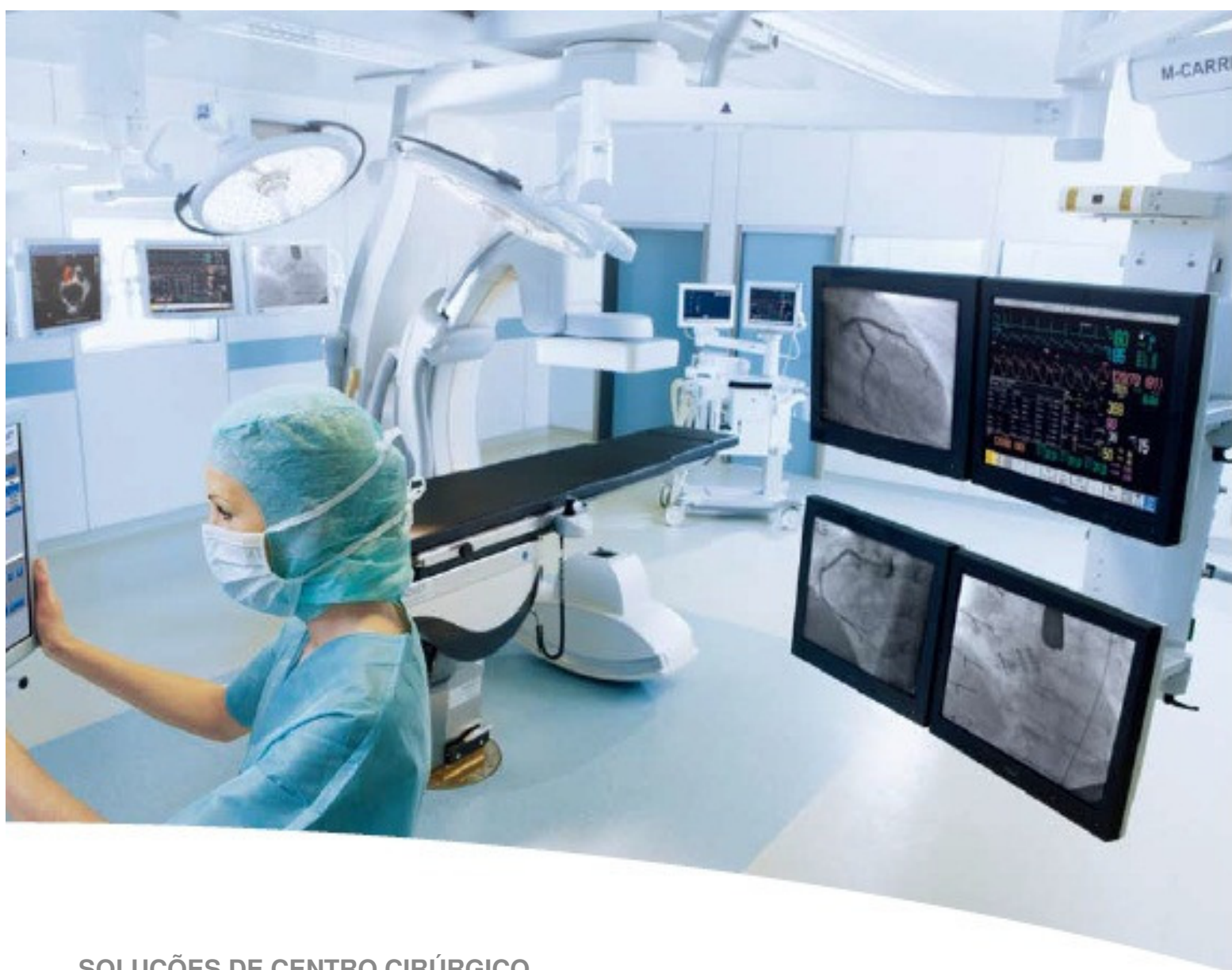

SOLUÇÕES DE CENTRO CIRÚRGICO O CAMPEÃO LEVE DE LEVANTAMENTO DE PESO

Especialmente no Centro Cirúrgico, onde espaço é precioso, o M-CARRIER é o parceiro indispensável para equipamentos cirúrgicos e o suporte ideal para configurações de anestesia.

Fácil de manobrar com um raio de ação convincentemente grande e uma faixa de ajuste de até 700 mm. Assim, ele simultaneamente oferece espaço de cabeça e liberdade de posicionamento.

Retrai para a posição de estacionado graças ao braço de elevação de longo alcance. O motor pode ficar bem acima do nível de cabeça, enquanto os teclados, dispositivos de frequência cardíaca, telas de imagens e outros equipamentos são baixados para a altura individualmente ergonômica do usuário.

- Centro Cirúrgico Híbrido: Posiciona até 4 telas como uma cabine no nível dos olhos para comparar informações do paciente, imagens atuais e gravadas ao mesmo tempo.

- Suspensão cirúrgica: Acomoda e fornece energia e gás aos equipamentos cirúrgicos. Oferece também opções de armazenamento para acessórios cirúrgicos.
- Estação de trabalho de anestesia: Tela de CIS, monitoramento de paciente e pólos IV no alcance, enquanto mangueiras são mantidas fora do chão e cabos dispostos de maneira que não se embolem.
- Suítes GI: Design geral que proporciona economia de espaço, dutos de gerenciamento de cabos e capacidade de manobra otimizam o fluxo de trabalho, suportando assim rápidas curvas.
- Segurança: A parada de emergência única permite que qualquer pessoa interrompa e reduza o movimento instantaneamente, caso seja necessário.

M-CARRIER VERSÁTIL E ATRAENTE



A equipe experiente da MAQUET se esforça para otimizar cada aplicação configurada individualmente – podem ser planejadas em detalhes com nossa ferramenta de planejamento avançada OR3D.



Gerenciamento de cabos, ambiência e iluminação da área de trabalho – exemplos dos itens essenciais da estação de trabalho MAQUET para disposições bem projetadas.

M-CARRIER DADOS TÉCNICOS

Faixa de Módulos	Máx. de Conduítes	Módulos de Distribuição	Número de painéis	Soquetes elétricos por painel 60mm de separação	Soquetes de gás por painel 100mm de separação
TONIC	8	TUB DIS 1001A	1	12	7
		TUB DIS 1201A	1	12	7
		TUB DIS 1401A	1	18	11
		TUB DIS 1601A	1	18	11
SLIMLINE	12	SLIMLINE 400	3	5	3
		SLIMLINE 600	3	8	5
		SLIMLINE 800	3	12	7
MOBILI	12	MOD 403	3	5	3
		MOBILI 600	3	8	5
		MOD 803	3	12	7
CONSOLE	16	CONSOLE 400	6	5	3
		CONSOLE 600	6	8	5
		CONSOLE 800	6	12	7

Escolha de movimento	0-9	0-11	6-9	6-11	9-9	9-11
Alcance do braço						
Alcance (mm/pol.)	900/35,4	1.100/43,3	1.500/59,1	1.700/66,9	1.800/70,9	2.000/78,7
Capacidade de carga (Kg/lbs)	100/220,5	80/176,4	100/220,5	80/176,4	100/220,5	80/176,4
Movimento vertical (mm/pol)	565/22,2	700/27,6	565/22,2	700/27,6	565/22,2	700/27,6
Velocidade de Suspensão	15-17 segundos					

Capacidade em termos de soquetes e condutos dos módulos de distribuição M-CARRIER.



Subsidiárias

Austrália:

MAQUET Australia Pty Ltd
PO Box 3451, Tingalpa DC
Queensland 4173, Austrália
Telefone: +61 (0) 7 33 99 33 11

China:

MAQUET (Shanghai) Medical Equipment Co., Ltd.
7F, Metro Plaza, 555 Lou Shan Guan Road,
Shanghai 200051, R.P. China:
Telefone: +86 (0) 21 62280202

França:

MAQUET Parc de Limène
Avenue de La Pomme de Pin Ardon
45074 Orléans Cede x 2, França
Telefone: +33 2 38 25 88 88

Alemanha:

MAQUET GmbH & Co. KG
Kehler Straße 31
D-76437 Rastatt, Alemanha
Telefone: +49 (0)1803 212133

Hong Kong:

MAQUET Hong Kong Limited
1105-1107 Grand Century Place I
193 Prince Edward Road West
Mongkok, Kowloon, Hong Kong
Telefone: +852 2393 9 511

Índia:

MAQUET Medical India Pvt. Ltd.
2nd Fir, Mehta Trade Centre
Sir M V Road, Andheri (East)
Mumbai - 400099, Índia
Telefone: +91-22-4069 2100

América Latina:

MAQUET do Brasil Ltda.
Rua Said Aiach 161, Paraíso
04003-20 São Paulo /SP, Brasil
Telefone: +55 (0) 11 2126 2500

Itália:

MAQUET Italia S.p.A.
Via Gozzano 14
I-20092 Cinisello Balsamo (MI), Itália
Telefone: +39 (0) 2 6111 351

Países Baixos:

MAQUET Netherlands B.V.
Oscar Romerolaan 3
1216 TJ Hilversum, Países Baixos
P.O. Box 388
1200 AJ Hilversum, Países Baixos
Telefone: +31 (0) 35 6255320

Portugal:

MAQUET Portugal Lda
Rua Poeta Bocage, 2 - 2ºG
Telheiras 1600-233 Lisboa, Portugal
Telefone: +351 214 189815

Cingapura:

MAQUET South East Asia Pte Ltd.
20 Bendemeer Road
#06-01/02 Cyberhub Building
Singapore 339914, Cingapura
Telefone: +65 6 296 1992

Espanha:

MAQUET SPAIN, S.LU.
Av. Castilla, 2. P. Emp. San Fernando
Edif. Francia Pta. Baja
28830 San Fernando de Henares
Madrid (Espanha)

Reino Unido:

MAQUET Ltd.
14-15 Burford Way
Baldon Business Park
Sunderland
Tyne & Wear, NE35 9PZ, Reino Unido
Telefone: +44 (0) 191 519 6200

E.U.A:

MAQUET, Inc.
45 Barbour Pond Road, Wayne, NJ 07470
Toll Free: 888-627-8383 Main
Telefone: +1 973-709-7000

MAQUET

GETINGE GROUP

MAQUET
GETINGE GROUP
MAQUET (Suzhou) Co., Ltd.
No.158 Fangzhou Road,
Suzhou, P.R.China 215021
Telefone: +86 (0) 512 62839880
Fax: +86 (0) 512 62838861
www.maquet.com

Para contato local:

Visite nosso website
www.maquet.com

O GETINGE GROUP é um fornecedor líder de produtos e sistemas que contribuem para aprimorar a qualidade e a eficiência em termos de custos em cuidados com a saúde e ciências vitais. Operamos sob as três marcas da ArjoHuntleigh, GETINGE e MAQUET. A ArjoHuntleigh tem foco em mobilidade de pacientes e soluções de gerenciamento de feridas. A GETINGE oferece soluções para controle de infecções dentro de cuidados com a saúde e prevenção de contaminação em ciências vitais. A MAQUET se especializa em soluções, terapias e produtos para intervenções cirúrgicas e terapia intensiva.